


Protocole unique pour l'ensemble
des tests de la gamme IMMUVIEW®

TESTS RAPIDES DE LA GAMME
IMMUVIEW®

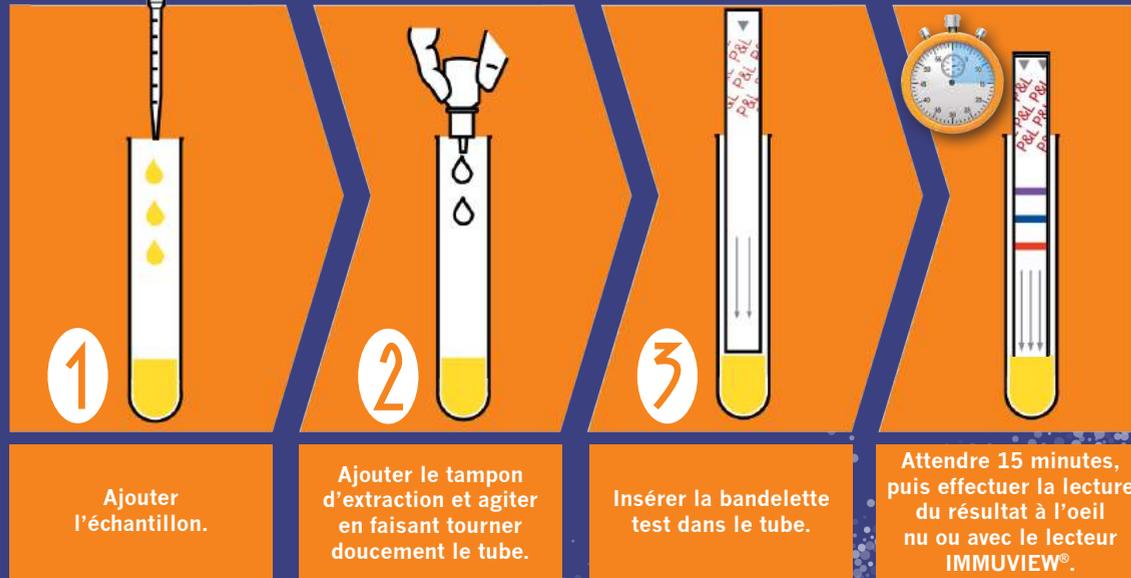

Lecture visuelle ou à l'aide du lecteur IMMUVIEW®

LA PREUVE PAR

IMMUVIEW® *S. pneumoniae* / *L. pneumophila*


1 test / 2 résultats

IMMUVIEW® *L. pneumophila* / *L. longbeachae*


Toutes les légionelles en 1 test

IMMUVIEW® *S. pneumoniae*

Rien que le pneumocoque

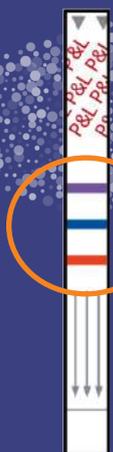

BANDES TESTS DE COULEURS POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE LISIBILITÉ

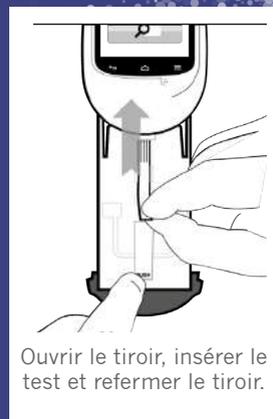

IMMUVIEW® READER

REF : 98879

Fabriqué par :



- 1 Performance :**
 - Sensibilité et spécificité améliorées.
- 2 Innovation :**
 - Test combiné, détection de *L. longbeachae*.
- 3 Rapidité :**
 - Test simple et rapide, résultat en 15 minutes.

Immeuble Horus
276 chemin de Roumpinas - 83150 Bandol - France

Tél. : +33(0) 4 94 29 06 30 - Fax : +33(0) 4 94 29 06 31
info@biocentric.com
www.biocentric.com



Version 03 - 09/2018



TESTS RAPIDES DE LA GAMME

IMMUVIEW®

IMMUVIEW® est une gamme complète de tests permettant la détection et la différenciation des pneumocoques et des légionelles.

La gamme comprend 3 tests :



RÉSULTATS OBJECTIFS

IMMUVIEW® READER

IMMUVIEW® READER est le lecteur qualitatif pour tous les tests rapides de la gamme IMMUVIEW®.

Il fournit des résultats rapides et objectifs.

Les résultats sont interprétés, archivés et exportables par USB, Bluetooth et WIFI.

Une aide à la traçabilité.

1 | *S. pneumoniae* et *L. pneumophila*

IMMUVIEW® *S. pneumoniae* et *L. pneumophila* est le premier test rapide combiné permettant de différencier une infection présumée à pneumocoque ou à légionelle.

2 | *L. pneumophila* et *L. longbeachae*

IMMUVIEW® *L. pneumophila* et *L. longbeachae* est le premier test permettant la détection à la fois de *L. pneumophila* et de *L. longbeachae*.

3 | *S. pneumoniae*

IMMUVIEW® *S. pneumoniae* détecte tous les sérotypes de pneumocoque avec une haute sensibilité et spécificité à la fois sur urine et sur LCR.

PERFORMANCES

Urine (Sensibilité)	IMMUVIEW®	tests rapides de référence
<i>S. pneumoniae</i>	85% (60/71)	78% (55/71)
<i>L. pneumophila SG1</i>	89% (88/99)	72% (71/99)
<i>L. pneumophila non-SG1</i>	26% (13/50)	2% (1/50)

La spécificité pour *L. pneumophila* est de 100% (0/76) et pour *S. pneumoniae* de 99% (1/76).

LCR	IMMUVIEW® Sensibilité	IMMUVIEW® Spécificité
<i>S. pneumoniae</i>	100% (27/27)	100% (205/205)
<i>L. pneumophila</i>	non évalué	100% (0/205)



CONTRÔLE
L. PNEUMOPHILA
S. PNEUMONIAE

REF	QUANTITÉ
95389	22 tests



1 TEST / 2 RÉSULTATS

PERFORMANCES

Urine (Sensibilité)	IMMUVIEW®	tests rapides de référence
<i>L. pneumophila SG1</i>	75% (38/51)	67% (34/51)
<i>L. longbeachae</i>	67% (10/15)	0% (0/15)
Combined	73% (49/67)	51% (34/67)

La spécificité obtenue avec IMMUVIEW® *L. pneumophila* et *L. longbeachae* est de 100%.

L. longbeachae est une infection émergente et la seconde espèce de légionelle responsable d'une infection chez l'homme.



CONTRÔLE
L. PNEUMOPHILA
L. LONGBEACHAE

REF	QUANTITÉ
98749	22 tests



TOUTES LES LÉGIONELLES EN 1 TEST INCLUANT *L. LONGBEACHAE*

PERFORMANCES

Urine	IMMUVIEW® <i>S. pneumoniae</i>
Sensibilité	93% (28/30)
Spécificité	98% (119/121)

LCR	IMMUVIEW® <i>S. pneumoniae</i>
Sensibilité	100% (11/11)
Spécificité	98% (160/163)



CONTRÔLE
S. PNEUMONIAE

REF	QUANTITÉ
98748	22 tests



RIEN QUE LE PNEUMOCOQUE

LA PREUVE PAR 3